

荧光定量检测试剂盒

FLUORESCENCE QUANTITATION ASSAY KITS

1xdsDNA HS Assay Kit

Cat. No. 090-002260-00

双链 DNA 高灵敏荧光定量

ssDNA Assay Kit

Cat. No. 090-002261-00

单链 DNA 荧光定量

0.2—100 ng

dsDNA 定量范围

1—200 ng

ssDNA 定量范围

<10%

批间偏差

精准定量 · 高效建库 · 智造未来

产品概览

项目	1xdsDNA HS Assay Kit	ssDNA Assay Kit
货号	090-002260-00	090-002261-00
规格	100 T / 500 T	100 T
定量范围	0.2–100 ng; 10 pg/μL–100 ng/μL	1–200 ng; 50 pg/μL–200 ng/μL
检测下限	0.2 ng (样本)	50 pg/μL
样本类型	双链 DNA (Input DNA、DNA 文库、gDNA 等)	寡聚核苷酸、引物、变性 DNA、单链环状 DNA 等
储存条件	2–8℃ 保存, 有效期 1 年	

广泛兼容的定量平台

手工定量

- Qubit® 荧光仪 (推荐搭配专用检测管)
- 荧光酶标仪 (黑色酶标板, Ex 480 nm / Em 520 nm)

自动化平台

- AIO 建库测序一体机
- SIRO 系列自动化系统
- PrepALL 样本制备平台
- AlphaTool 智能移液工作站

核心优势



快速

即用式预混液
5 min 内出结果



灵敏

dsDNA 0.2–100 ng
ssDNA 低至 50 pg/μL



准确

与竞品偏差 < 10%
三批次结果一致




稳定

批间一致
信号 5.75 h 不衰减

1×dsDNA HS Assay Kit 性能展示


高灵敏预混版双链 DNA 定量试剂盒，对 dsDNA 具有高度选择性，在 0.2–100 ng 区间具有良好线性，是 NGS 大规模 DNA 样品定量（Input DNA、DNA 文库定量等）的理想选择。

染料结合特异性

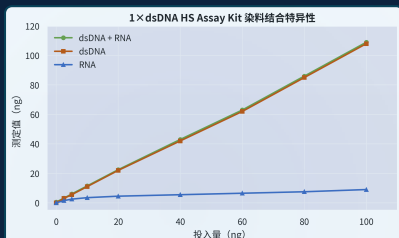


dsDNA 与 dsDNA+RNA 曲线重合，RNA 近零背景

荧光持续性（不避光）

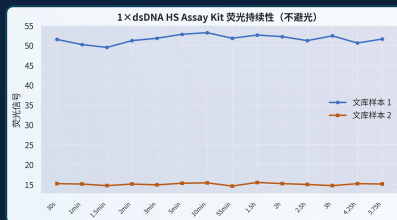

30 s–5.75 h 信号稳定维持

批间稳定性

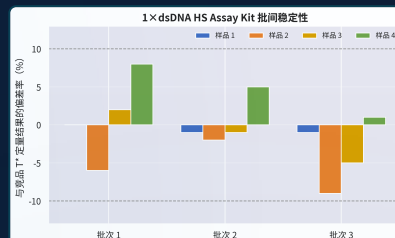

三批次与竞品 T* 偏差率 $\pm 10\%$ 以内

产品特点

即用型 预混液形式，无需额外配制染料工作液，操作更简便高效

高选择性 对 dsDNA 具有高度选择性，RNA 干扰极低

宽线性 0.2–100 ng 区间具有良好的线性关系

污染物耐受 对蛋白质、盐类等常规污染物具有较好耐受性


信号持久 荧光信号在室温下 5.75 h 内稳定不衰减

批间一致 不同生产批次之间无差异，质控标准严格

ssDNA Assay Kit 性能展示


简便、灵敏、精确的单链 DNA 荧光定量检测试剂盒，检测浓度低至 50 pg/μL，实现寡聚核苷酸、引物、变性 DNA、单链环状 DNA 等的快速准确定量。

良好的线性 (R² = 0.9971)

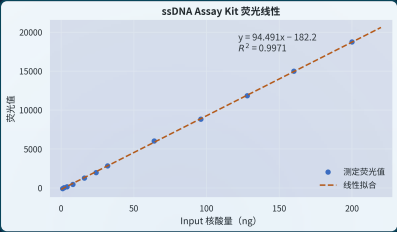


$y = 94.491x - 182.2, R^2 = 0.9971$

定量一致性

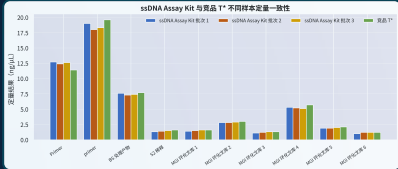

三批次与竞品 T* 定量结果整体一致

污染物耐受性

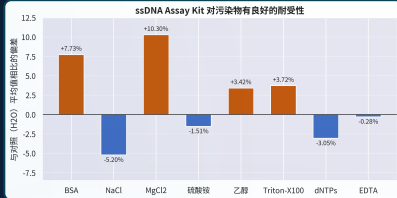

8 种常见污染物偏差 -5.20% ~ +10.30%

稳定性测试 (37°C 加速)

- 标准品 S2: 10 天内荧光信号稳定 (CV ≤ 5.58%)
- 1x 工作液: 8 天内荧光信号稳定
- 室温下可维持稳定的荧光强度

应用场景

- 寡聚核苷酸、引物快速定量
- 变性 DNA、单链环状 DNA 定量
- MGI 环化文库质量控制
- 不同单链类型样本 (Probe Mix、Primer 稀释液等)

订购信息

1xdsDNA HS Assay Kit Cat. No. 090-002260-00 规格: 100 T / 500 T

ssDNA Assay Kit Cat. No. 090-002261-00 规格: 100 T

储存: 2-8°C 保存, 有效期 1 年

官网: www.mgi-tech.com

热线: 4000-688-114

邮箱: MGI-service@mgi-tech.com

注: 本产品由华大智造 (MGI) 提供。文中测试数据引自登圣生物官网产品页、技术彩页及解决方案文章 (solutiondetail/2906)。彩页中未收录 dsDNA BR、RNA HS、RNA BR 等其他试剂盒数据。图片数值为按原始图表读取的近似值, 具体以实际检测报告为准。